




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE barre d'appui 612 mm. Emballée pour la vente R1454000
Couleur	VVS:777548430 NRF:6311137 RSK:8980535 EAN:5708590169774 NBS:N13:436 Blanc
Description	 Barre d'appui ABS préemballée, 612 mm, diamètre 32 mm Pour montage fixe, vis de montage incluses VALUE barre d'appui préemballée, 612 mm, diamètre 32 mm. Matériaux : Plastique-ABS teinté. Vis de montage pour brique pleine incluses.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe
Capacité du produit	Ce produit a été testé statiquement jusqu'au 150 kg. Car la norme européenne NF/EN 12182:2012 concernant les produits d'assistance pour personnes en situation de handicap exige un test statique avec un facteur de sécurité de 1,5, la charge maximale admissible pour ce produit est de 100 kg.
Matériaux Ergonomie Fonctions	Plastique-ABS. Le plastique est teinté, de sorte que les rayures et l'usure passent inaperçues. Le système de barres d'appui en plastique ABS garantit une bonne préhension en toute situation. Agréable au toucher, la surface rainurée assure un appui stable. Les barres permettent de nombreux assemblages individualisés pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. La diamètre de la barre est de 32mm, idéal pour garantir une bonne préhension de la barre qui tient bien en main. Une fois montée, la distance séparant le mur de la barre est de 50mm, distance idéale pour garantir une bonne préhension de la barre. La surface à rainures de la barre d'appui garantit une bonne préhension.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

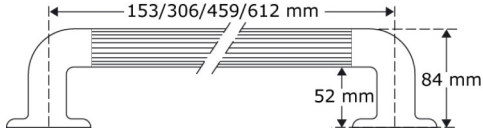

PRESSALIT®

Article	VALUE barre d'appui 612 mm. Emballée pour la vente
Numéro article	R1454000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.

pressalit.com

PRESSALIT®