




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	CareSystem Stützklappgriff, seitlich verschiebbar R3516000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Stützklappgriff ohne Federbelastung, 600 mm Ausladung, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p> <p>Stützklappgriff ohne Federbelastung, 600 mm Ausladung, für Montage auf waagerechter Wandschiene Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
<b>Verstellung</b>	Seitlich verstellbar
<b>Produktkapazität</b>	Max. Belastbarkeit: 135 kg.
<b>Materialien</b>	Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Oberflächenmaterial: Zwei-Komponenten-Kunststoff (PVC) Abdeckkappen: Arnite (PET,PETP)
<b>Ergonomie</b>	Der ovale Querschnitt des Stützklappgriffes ermöglicht einen sicheren Halt. Das Griffende ist aufgrund der ergonomisch sinnvollen Griffabrundung eine weitere gute und hilfreiche Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Das Oberflächenmaterial ist weich, rutsicher und fühlt sich nie kalt an.
<b>Funktionen</b>	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden. Die Unterseite ist zur Montage von verschiedenem Zubehör geeignet. Der Stützklappgriff ist auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar.

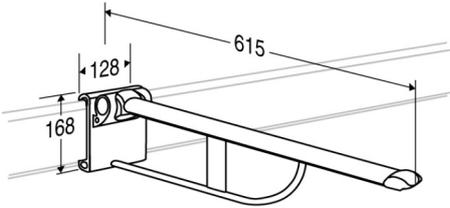

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	CareSystem Stützklappgriff, seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R3516000
<b>Reinigung</b>	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®