



**Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd**  
**Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren**  
**aangepast aan de verhoogde toiletzitting. Inclusief spatscherf**

**Artikelnummer**

R43000  
VVS:615697000  
NRF:6191645  
EAN:5708590186696  
HMI: 88826  
NBS:N13:300  
DB: 2296032

Toiletzitting Dania , met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm, incl. spatscherf. . Met verhoogd scharnier met doorlopende scharnierpen






**Kleur**

Wit

**Kenmerken**

Toiletzitting Dania , met stabilisatie buffers, met deksel, verhoogd 50 mm,incl. spatscherf.  
Met verhoogd scharnier met doorlopende scharnierpen

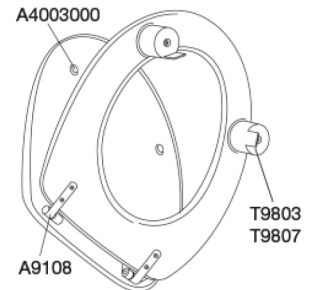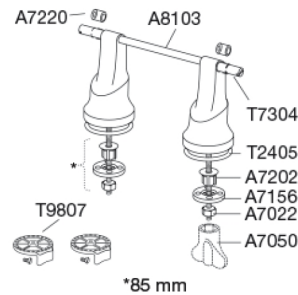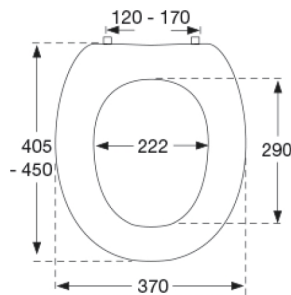

**Materialen**

Zitting: Duroplast kunststof (ureum)

Scharnier: roestvrijstaal V2A

Scharnierbus: nylon (PA)

Speciale buffer: ABS-kunststof

**Product capaciteit**

Dit product is statisch getest tot 225 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten, BS/EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1,5 vereist, is de nominale maximum belasting voor dit product dus 150 kg.

**Gewicht**

4,4 kg

**Gewicht per stuk**

4,7 kg

**Gewicht per colli**

4,7 kg

**Aantal per colli**

1



---

**Toiletzitting Dania met deksel, 50 mm verhoogd  
Met stabilisatie buffers en voorzien van speciale scharnieren  
aangepast aan de verhoogde toiletzitting. Inclusief spatscherm**

---

**Aantal per pallet**

0

**Reiniging**

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. <br> <i> Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld. </i>

**Garantie**

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. <br><br>Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.