




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem chaise de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement R7567000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	 <p>Chaise douche 410 avec dossier, assise évidée, réglable en hauteur de 330 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Chaise douche 410 avec dossier, assise évidée, réglable en hauteur de 330 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur et latéralement
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 150 kg.
<b>Matériaux</b>	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)
<b>Ergonomie</b>	Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 310mm-360mm. Design ergonomique

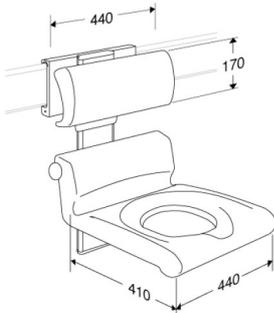

# PRESSALIT®

<b>Article</b>	CareSystem chaise de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement
<b>Numéro article</b>	R7567000
<b>Fonctions</b>	Assise évidée pour l'hygiène intime Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Réglable en hauteur de 340 mm Pour montage sur glissière horizontale
<b>Nettoyage</b>	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®