




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem chaise de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement R7568000
Couleur	Blanc
Description	 <p>Chaise douche 410 avec dossier et accoudoirs, assise évidée, réglable en hauteur de 340 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Chaise douche 410 avec dossier et accoudoirs, assise évidée, réglable en hauteur de 340 mm (assise), pour montage sur glissière horizontale (non comprise). Supprimé le 31/12-2015</p>
Réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur et latéralement Charge maximale admissible: 150 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Surface d'accoudoirs: plastique à deux composants. Extrémité d'accoudoirs: Arnite Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)
Ergonomie	La forme ovale des accoudoirs garantit une bonne préhension et un appui satisfaisant. Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 410mm-440mm.

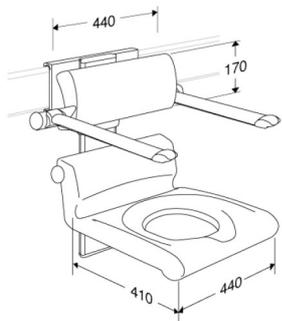

PRESSALIT®

Article	CareSystem chaise de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement et latéralement
Numéro article	R7568000
Fonctions	<p>Assise évidée pour l'hygiène intime</p> <p>Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace</p> <p>Réglable en hauteur de 340 mm - l'assise et le dossier sont réglables en hauteur, indépendamment l'un de l'autre</p> <p>Pour montage sur glissière horizontale</p>
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®