



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS handgreep 1000 mm RT104000
Kleur	VVS:777565500 NRF:6191673 RSK:8980552 EAN:5708590145945 HMI: 19085 NBS:N13:436 Wit
Beschrijving	PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid. PLUS handgreep, diameter 33 mm, lengte 1000 mm, voor vaste montage. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden. Inkl. muur rozet, die de bevestigingen bedekt. Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Product capaciteit	Maximale belasting: 235 kg. Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg. <i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycology kunststof
Ergonomy	Door de diameter van 33 mm kan de handgreep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden.



PRESSALIT®

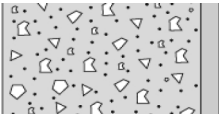
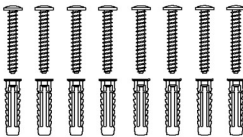
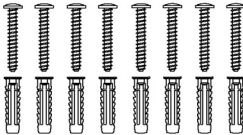
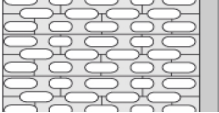
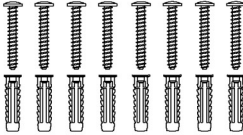
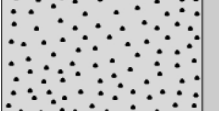
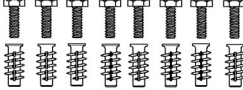
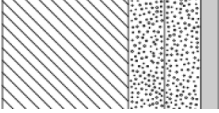
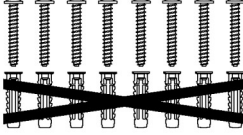
Product	PLUS handgreep 1000 mm
Artikelnummer	RT104000
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. < br> ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

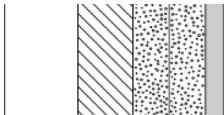
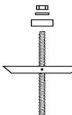
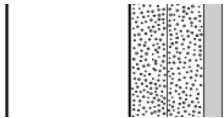
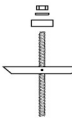
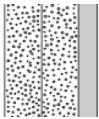
Product	PLUS handgreep 1000 mm
Artikelnummer	RT104000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8666 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS handgreep 1000 mm RT104000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

pressalit.com