




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem support frontal ou dorsal, 450 - 520 mm RT800000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	 <p>Appui frontal ou dorsal. Longueur (A) réglable de 450 mm à 520 mm. Pour chaise de douche 310 ou barres de relèvement.</p> <p>Appui frontal ou dorsal. Longueur (A) réglable de 450 mm à 520 mm. Pour chaise de douche 310 ou barres de relèvement.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 70 kg.
<b>Matériaux</b>	Plastique à deux composants (PVC) Serrure: Acier inoxydable
<b>Ergonomie</b>	Stabilise et corrige la position de l'utilisateur souffrant de troubles d'équilibre.
<b>Fonctions</b>	Plage de réglage: 450-520 mm
<b>Nettoyage</b>	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

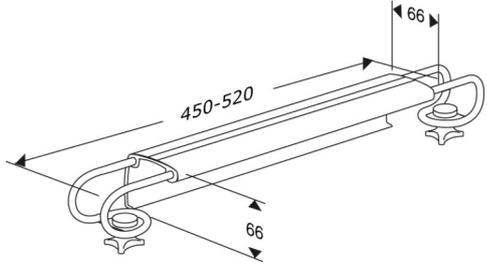

PRESSALIT®

---

<b>Article</b>	CareSystem support frontal ou dorsal, 450 - 520 mm
<b>Numéro article</b>	RT800000

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®