




Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar och sido reglerbar med gascylinder R4680
	VVS: 654002200 NRF: 6132533 RSK: 7972591 EAN: 5708590309446 HMI: 71757 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473
	
Beskrivning	<p>PLUS upphängning till tvättställ med gascylinder, 300 mm steglös höjdregering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukhängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Till tvättställ på 16-22 kg. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ med gascylinder, 300 mm steglös höjdregering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukhängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Till tvättställ på 16-22 kg. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).</p>
Justerbar Höjjustering	Höjd- och sidoregerbar 300 mm



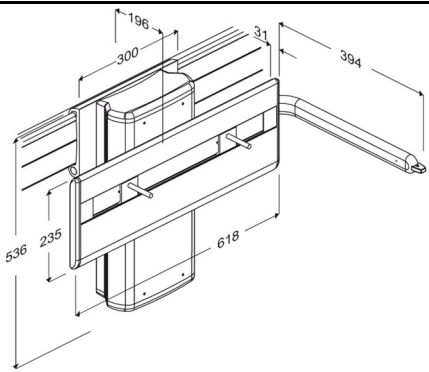

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuell höjdregerbar och sido reglerbar med gascylinder R4680
Produktkapacitet	Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ 16-22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 30 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 20 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 153 kg belastar tvättstället.</i>
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar och sido reglerbar med gascylinder
Varunummer	R4680



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®