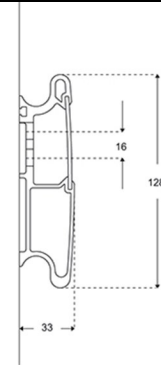




Produkt	PLUS Wandschiene, 2100 mm
Produktnummer	R9821112 VVS:615841121 NRF:7501018 EAN:5708590305837 HMI: 71744
Farbe	Anthrazitgrau
Produktbeschreibung	<p>PLUS Wandschiene, 2100 mm, zur waagerechten Montage. Die Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten.</p> <p>Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Exkl. Wandbefestigungen. Nähere Informationen über das geeignete Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandtypen finden Sie unter "Technische Daten (pdf)".</p> <p><i>Ersetzt R9906.</i></p>
Verstellung	Festmontage
Höhenverstellung	
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg
Materialien	Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.
Ergonomie	Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.
Funktionen	Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.





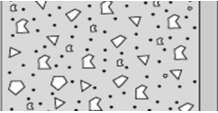

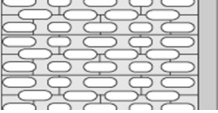
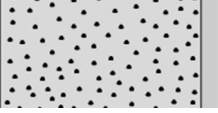
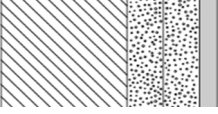
Produkt	PLUS Wandschiene, 2100 mm
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist.





Produkt	PLUS Wandschiene, 2100 mm
----------------	---------------------------

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.
	Vollziegel >= Mz12 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.
	Porenbeton P4 V8670 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8620 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.





PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 2100 mm
----------------	---------------------------



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®