




Produkt Produktnummer	PLUS Wandschiene, 2700 mm R9827112
Farbe	Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	<p>VVS:615841127 NRF:7501064 EAN:5708590305875 HMI: 71746</p>  <p>PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten.</p> <p>PLUS Wandschiene, 2700 mm, zur waagerechten Montage. Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg
Materialien Ergonomie Funktionen	<p>Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.</p> <p>Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.</p> <p>Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.</p>
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

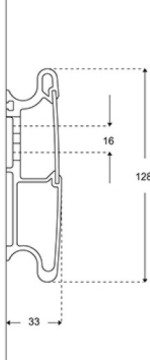

Produkt	PLUS Wandschiene, 2700 mm
Produktnummer	R9827112
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Dieses Produkt erfüllt somit sämtliche relevante Forderungen in Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte in Risikoklasse I. Dieses Produkt wird als Zubehör für Medizinprodukte angesehen, da es selbst kein Medizinprodukt ist, aber zusammen mit mehreren bestimmten Medizinprodukten verwendet werden soll, und der speziell deren Verwendung gemäß ihrer Zweckbestimmungen ermöglicht.</p>