




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS glissière-support, 3600 mm R9836112	
Couleur	VVS:615841136 NRF:7501067 EAN:5708590305936 HMI: 71750 Gris anthracite	
Description	PLUS glissière-support sert de suspension de barres de relèvement, sièges de douche et supports de lavabo, et rend possible le réglage latéral de ces produits. Veuillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support. PLUS glissière-support, 3600 mm, pour montage horizontal. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.	
Réglage Capacité du produit	Montage fixe	Charge maximale admissible : supporte - en fonction de l'état du mur - une charge maximale de 1000 kg maximum
Matériaux Ergonomie Fonctions	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les glissières-support horizontales donnent de la flexibilité à l'aménagement. Les produits peuvent être décalés latéralement sur la glissière afin que leur positionnement respecte les impératifs d'espace, de soins et de manipulation. Le poids de chaque produit de salle de bains est réparti sur toute la longueur de la glissière. Les produits peuvent être fixés sur la glissière avec fonctions de réglage et de verrouillage intuitives. La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.	
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.	

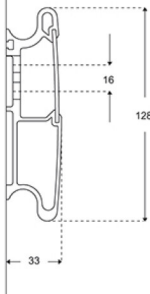

PRESSALIT®

Article	PLUS glissière-support, 3600 mm
Numéro article	R9836112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sufanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences pertinentes du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans la classe de risque I. Ce produit est considéré comme un accessoire de dispositif médical, car sans être lui-même un dispositif médical, il est destiné à être utilisé avec plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ces derniers conforme à leur destination.

pressalit.com

PRESSALIT®