




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wandrail, 3900 mm R9839112
<b>Kleur</b>	Antracietgrijs
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS:615841139 NRF:7501068 EAN:5708590305950 HMI: 71751</p>  <p>PLUS wandrail wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails.</p> <p>PLUS wandrail, 3900mm voor horizontale montage. De wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels, en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigd de reiniging. Materialen: aluminium en polystyreen. Excl. bevestigingsmateriaal</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	Vaste montage
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: tot 1000 kg afhankelijk van het wandtype.
<b>Materialen</b>	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
<b>Ergonomy</b>	De rail verdeelt het gewicht van het individuele badkamer product, bijvoorbeeld een wastafel muurframe, over de gehele lengte. De producten kunnen worden afgesteld en vergrendeld op de rail met intuïtieve vergrendelingsfuncties.
<b>Funktie</b>	De horizontale rail maakt het mogelijk om het product langs de muur te verplaatsen om de beschikbare ruimte in de badkamer constant te optimaliseren. De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

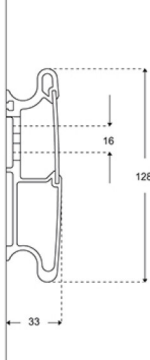

<b>Product</b>	PLUS wandrail, 3900 mm
<b>Artikelnummer</b>	R9839112
<b>Reiniging</b>	<p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.</p> <p>"</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in risico klasse I. Het product is <b>toebehoren</b> van medische hulpmiddelen, hoewel het zelf geen medisch hulpmiddel is, maar is om samen met een of meer specifieke medische hulpmiddelen te worden gebruikt om het met name mogelijk te maken dat de medische hulpmiddelen worden gebruikt overeenkomstig de beoogde doeleinden ervan.</p>