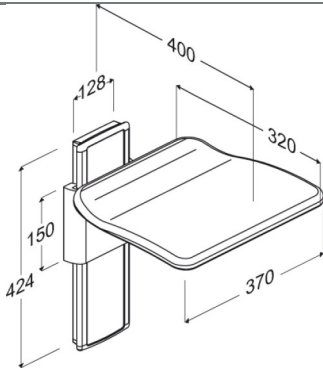




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjddreglerbar R5520112000
Färg	VVS:777531200 NRF:7501003 RSK:7973927 EAN:5708590306360 HMI: 130158 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Vit
Beskrivning	 PLUS uppfällbar sits, höjddreglerbart 240 mm. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Sitsen är uppfällbar. Exkl. Monteringsskruvar. Klappsits bör inte användas direkt i duschen. PLUS uppfällbar sits, höjddreglerbart 240 mm, antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium, hårdplast, plastmaterial. Exkl. Monteringsskruvar.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 240 mm Max brukarvikt: 265 kg När sitsan belastas med 265 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS uppfällbara sitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmålet.</i>
Material	Aluminium, hårdplast, plastmaterial.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

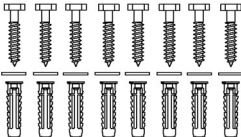
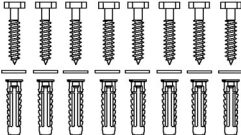
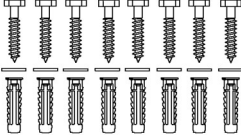
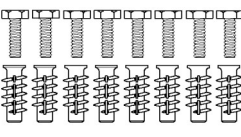
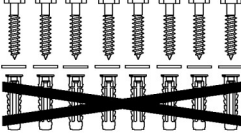
Product	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjreglerbar
Varunummer	R5520112000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

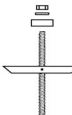
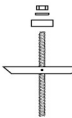
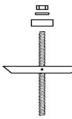
Product	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjdglerbar
Varunummer	R5520112000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS uppfällbar sits, manuellt höjreglerbar R5520112000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

pressalit.com