




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne zur Festmontage R6510000
Farbe	VVS: 777538200 NRF: 6190615 EAN: 5708590314303 HMI: 71810 NBS: N13:426 FDA: INN/D135865 Weiß
Produkt- beschreibung	 PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert. Für WC ohne Spülkasten, zur Festmontage. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk. PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert. Für WC ohne Spülkasten, zur Festmontage. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: 100 kg.
Materialien Ergonomie Funktionen	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an. Der Rückenlehne kann mit hochhängendem Spülkasten verwendet werden.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.

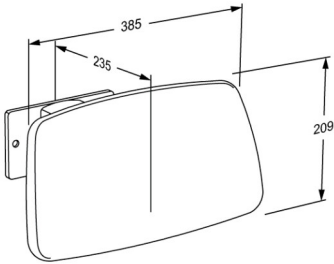

PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne zur Festmontage
Produktnummer	R6510000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Terralin protect Dismonzon Plus NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor Petrosol Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®