




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS valpreventie beugel, 450-520 mm RT873000
Kleur	VVS:777539000 NRF:7501039 EAN:5708590314150 HMI: 124198 NBS:N13:426 Wit
Beschrijving	 <p>PLUS valpreventie beugeln zijn verkrijgbaar in drie verschillende lengtes en kunnen ook als rugsteun worden gebruikt.</p> <p>PLUS valpreventie beugel, 450 - 520 mm. Voor PLUS douchezitting 310 en PLUS toiletsteunen</p>
Product capaciteit	Maximale belasting 70 kg
Materialen	Staal en kunststof
Ergonomy	Stabiliseert en corrigeert de gebruiker met een verminderde lichaamsbalans.
Functie	<p>Voor mensen met een lichamelijke handicap, met name degenen met een beperkte kracht/stabiliteit van het bovenlichaam, of degenen die lijden aan onwillekeurige bewegingen of toevallen, is het een reëel risico om voorover van het toilet te vallen. In tegenstelling tot riemen en riemen, die kunnen knellen en oncomfortabel tegen de huid kunnen zitten, worden deze verstelbare voor- en rugleuningen rechtstreeks tussen twee PLUS-toiletsteunen of tussen de armleuningen van een PLUS-douchezitting bevestigd.</p> <p>Hierdoor worden gebruikers veilig en comfortabel op hun plaats gehouden, wat hun veiligheid en functionaliteit verbetert, terwijl deze ook verzorgers helpen en meer gemoedsrust bieden.</p>
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

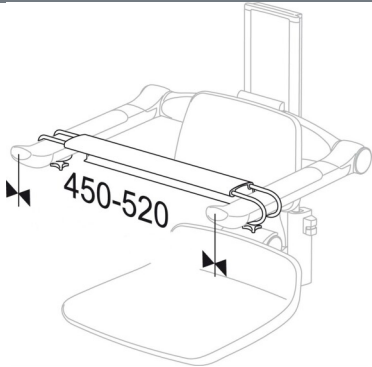

Product	PLUS valpreventie beugel, 450-520 mm
Artikelnummer	RT873000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	PLUS valpreventie beugel, 450-520 mm
Artikelnummer	RT873000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®