




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart R4580112
<b>Farve</b>	VVS: 654001510 NRF: 6132529 RSK: 7972588 EAN: 5708590309415 HMI: 71758 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulerbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng. Manuelt højderegulérbart 240 mm ved hjælp af betjeningsgreb. Højde- og sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Til montering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højde- og sideværts regulérbar 240 mm Maksimal belastning: 135 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 30 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> <b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 151 kg støtter sig til vasken.</b>
<b>Materialer</b>	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.

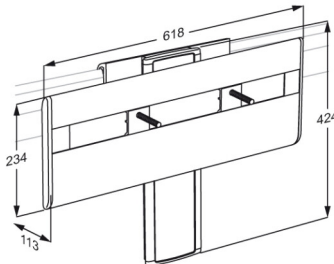

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4580112
<b>Ergonomi</b>	Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
<b>Funktioner</b>	Når håndvaskens højde kun lejlighedsvis skal ændres, kan et manuelt regulérbart vaskophæng være en god løsning. Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering. Ved anvendelse der kræver daglig højderegulering anbefales gasdrevet vaskophæng R4680 eller et eldrevet vaskophæng R478x.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4580112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overenstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højde- og sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R4580112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®