

PRESSALIT.

Produkt	PLUS Eckhaltegriff 762 x 475 mm		
Produktnummer	RT124112		
	VVS:777568212		
	NRF:6311225		
	RSK:8980579		
	EAN:5708590318752		
	HMI: 25425		
	NBS:N13:436		
Farbe	Anthrazitgrau		
Produkt- beschreibung	PLUS Haltegriffe sind qualitativ hochwertige Produkte, die vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bieten, und der Einrichtung des funktionellen Badezimmers den letzten Schliff verleihen. Eine stabile Haltegrifflösung mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann den Weg zu mehr Autonomie erleichtern. PLUS Eckhandlauf, Durchmesser 33 mm, rechts/links drehbar, A: 762 mm x B: 475 mm, zur Festmontage. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 50 mm und vereinfacht es damit de Griff zu greifen. Inkl. Wandrosette, die die Schrauben verdeckt. Materialien: Pulverlackiertes Aluminium und Kunststoff. Exkl. Wandbefestigungen.		
Produktkapazität	Maximale Belastung: 235 kg. Bei einer Belastung der Haltegriff mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich n bis zu 56 kg belastet. Die Haltegriffe wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus DIN/ISO 17966:2016 mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 geprüft.		
Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminium Abdeckkappen aus Cycoloy Kunststoff		
Ergonomie	Der Griffdurchmesser beträgt 33 mm. Der Griff liegt dadurch gut und fest in der Hand. Ein montierter Griff hat einen Abstand von 50 mm zur Wand.		
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermes ausgebessert oder neu geliefert werden.		



PRESSALIT.

Produkt	PLUS Eckhaltegriff 762 x 475 mm			
Produktnummer	RT124112			
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:			
	Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden			
	und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden			
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produzier worden.			



PRESSALIT.

D	-	ᆈ		1,4
\mathbf{r}	ro	u	u	ĸι

PLUS Eckhaltegriff 762 x 475 mm

Produktnummer

RT124112


Montage in verschiedenen Wandtypen

G. V. Q. L. Q. Q.	
L. Z. a. Z	
D : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
O. V.D. V. B	
a · D : [(· · · · ·)	

Beton >B25

V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.




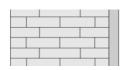

Vollziegel >= Mz12

V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.



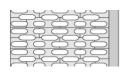

Kalklochsandstein >= Hlz12

V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8, für massives Mauerwerk. Muss separat bestellt werden.






Porenbeton P4

V8667 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6.

Muss separat bestellt werden.



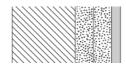

Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung

V8617 - Befestigungsmaterial, 12 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.





PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Eckhaltegriff 762 x 475 mm RT124112	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (12 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	<u>^</u>

pressalit.com