




Produkt	PLUS Rückenlehne zur Festmontage
Produktnummer	R6515000
Farbe	VVS:777538300 NRF:6190617 EAN:5708590325286 NBS:N13:426 Weiß 
Produkt- beschreibung	PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert, für SELECT WC-Lifter. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Für Montage auf SELECT WC-Lifter, inklusive Befestigungsmaterial. PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert, für SELECT WC-Lifter. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Für Montage auf SELECT WC-Lifter, inklusive Befestigungsmaterial.
Verstellung	Festmontage
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: 100 kg.
Materialien	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
Ergonomie	Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an.
Funktionen	Der Rückenlehne kann mit hochhängendem Spülkasten verwendet werden.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

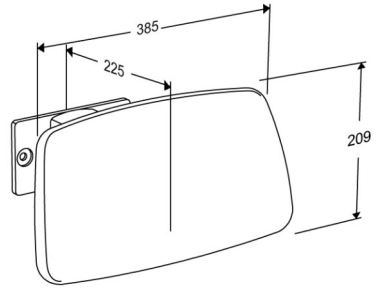

PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne zur Festmontage
Produktnummer	R6515000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Terralin protect Dismonzon Plus NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor Petrosol Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.

pressalit.com