




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS duschsits 310, manuellt höjreglerbar R7302000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjreglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p> <p>PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjreglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b> <b>Produktkapacitet</b>	Höjreglerbar 230 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.

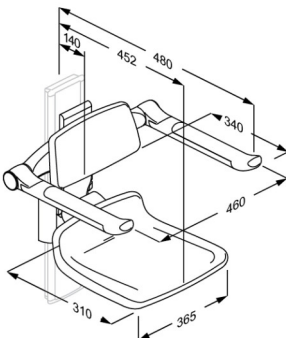

<b>Product</b>	PLUS duschsits 310, manuellt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R7302000
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>