




Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjddreglerbar R7302000
Färg Beskrivning	VVS: 777532200 EAN: 5708590328256 Vit PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjddreglerbart 230 mm, utan användning av verktyg. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 230 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statistiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjddregleras oberoende av sits och ryggstöd.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



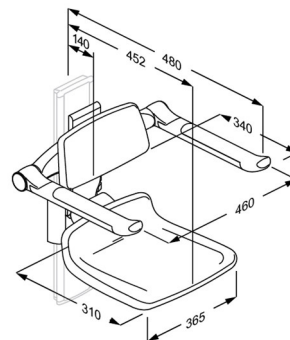

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjdregerbar R7302000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättspirit 70%</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®