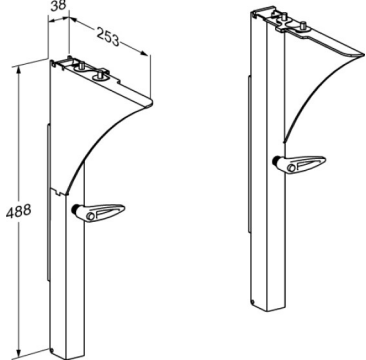




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, 200 mm höhenverstellbar R2015182
<b>Farbe</b>	VVS:636858810 NRF:6132552 EAN:5708590329345 HMI: 106240 NBS:N13:30,335 Hellgrau
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Die MATRIX Wandhalterungen sind eine kostengünstige Lösung für die Verwendung der MATRIX MEDIUM- und ANGLE- Waschtische. Die Wandhalterung R2015 ist manuell um 200 mm in der Höhe einzustellen und empfehlenswert, wenn der Waschtisch nur selten in der Höhe verstellt werden muss. Die Wandhalterung R2010 ist nicht höhenverstellbar – der Waschtisch wird in einer festen Höhe montiert.</p> <p>Wandhalterungen, 2 Stck. 200 mm höhenverstellbare (Nicht für täglichen Höhenverstellung geeignet). Für MEDIUM und ANGLE Waschtische mit integrierten Griffen. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2067/R2065. Exkl. Befestigungsmaterial.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhenverstellbar 200 mm Maximales Benutzergewicht (MUM): 160 kg. Maximale Belastbarkeit (SWL): 150 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 30 kg. Bei einer Belastung mit 150 kg, trägt jede Befestigungsschraube 75 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. <b>Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt.</b> Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 150 kg und das Gewicht des Waschtisches 30 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 160 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
<b>Materialien</b>	Pulverlackierter Edelstahl

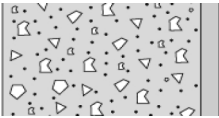
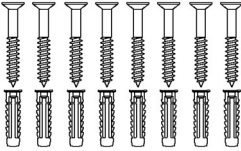

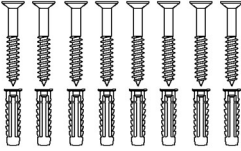
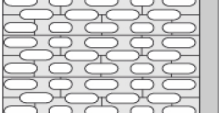
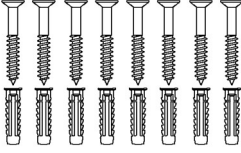
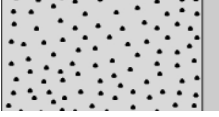

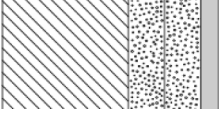
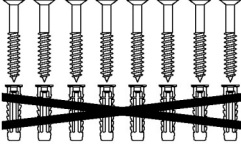


<b>Produkt</b>	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, 200 mm höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R2015182
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.

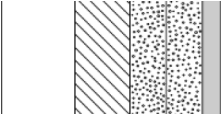

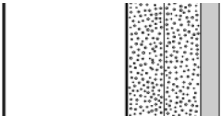

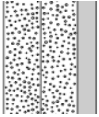



<b>Produkt</b>	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, 200 mm höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R2015182

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8601 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8601 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8601 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> It is not recommended to install this product in aerated concrete.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8601 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø6 x 70, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	MATRIX Wandhalterungen für Waschtisch, 200 mm höhenverstellbar R2015182
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.