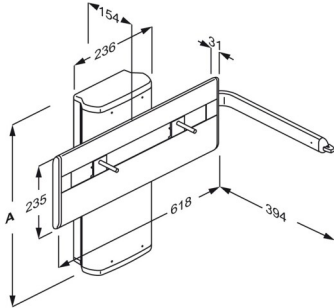




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4750
Beschrijving	VVS: 654003110 NRF: 6132534 RSK: 7972592 EAN: 5708590309309 HMI: 71761 NBS: N13:30,335  PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS wastafel muurframe, elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met elektrisch bedienbare hendel. De hendelbediening is geplaatst aan de voorzijde van wastafel, het kan worden gebruikt als handdoekhouder en aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoersysteem R2065/R2067. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. (Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/nieuwe CURVE wastafels). Materialen: aluminium en ABS polymeer. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 300 mm



Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4750
Product capaciteit	Maximale belasting: 100 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 100 kg, zal elke wandbevestiging met 42 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 100 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 104 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 23 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het frame is uitgevoerd met een hendelbediening bestaande uit een ABS polymeer schakelaar aan het uiteinde van een geanodiseerde aluminium arm.
Ergonomy	De hoogte van de wastafel is eenvoudig aan te passen met behulp van de elektrisch bedienbare bedieningshendel. Het muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoon maken.
Funktie	De arm van de bedieningshendel kan als handdoekhouder fungeren. De bedieningshendel kan aan de rechter- of linkerzijde van de wastafel worden geplaatst. Een onafhankelijke gebruiker kan eenvoudig het elektrisch aangestuurde wastafel muurframe bedienen.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

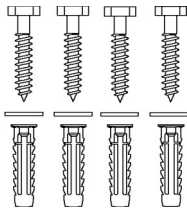
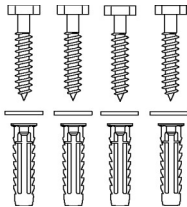
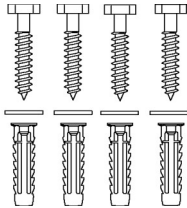
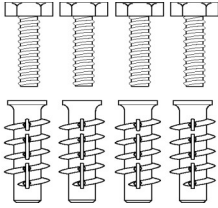
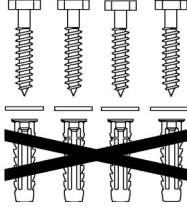
Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4750
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit het oppervlak kan beschadigen beschadigd zijn. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water. "
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG. Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark



PRESSALIT®

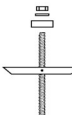
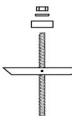
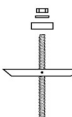
Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4750

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4750		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 

pressalit.com

PRESSALIT®