




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	VALUE II siège de douche, montage fixe R1610000112
<b>Couleur</b>	Gris anthracite
<b>Description</b>	<p>VVS:777525012 RSK:8162781 EAN:5708590355108 HMI: 124483</p>  <p>Le siège et le dossier de douche pliants VALUE II créent une solution simple pour les utilisateurs qui ont besoin de s'asseoir pendant la douche.</p> <p>VALUE II siège de douche. Hauteur fixe. Le siège est rabattable. Matériaux : aluminium moulé sous pression, acier inoxydable avec revêtement Rilsan et polyéthylène (PE) moulé sous vide. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
<b>Réglage</b> <b>Capacité du produit</b>	<p>Montage fixe</p> <p>Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg. Lorsque le siège est chargé de 125 kg, chaque vis de montage est chargé de 95 kg.</p> <p><i>Les VALUE sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i></p>
<b>Matériaux</b>	<p>La charnière murale est fait d'aluminium moulé sous pression. Le cadre est fait en acier inoxydable avec un revêtement Rilsan qui protège contre la corrosion, est agréable au toucher et facile à nettoyer. Le siège est fait de polyéthylène (PE) moulé sous vide.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.</p>

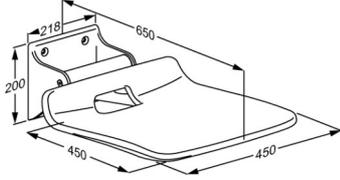

PRESSALIT®

<b>Article</b>	VALUE II siège de douche, montage fixe
<b>Numéro article</b>	R1610000112
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®