




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS support de lavabo, manuellement réglable latéralement R4560
<b>Couleur</b>	VVS:654001300 NRF:6132444 EAN:5708590309408 HMI: 106242 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Gris clair
<b>Description</b>	 <p>PLUS supports de lavabo sont disponibles en versions réglables en hauteur électriquement, pneumatiquement et manuellement. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit.</p> <p>PLUS support de lavabo, réglable latéralement. Flexibles R2064/R2065/R2067 recommandés. Matériaux : aluminium et matière synthétique. Avec fixations pour lavabo. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non comprise).</p>
<b>Réglage</b> <b>Capacité du produit</b>	Réglable latéralement  Charge maximale admissible : 135 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 22 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 97 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> <b>Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur.</b> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 135 kg avec un lavabo de 22 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 151 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i>
<b>Matériaux</b> <b>Ergonomie</b>	Le support de lavabo est principalement composé d'aluminium anodisé 10 microns. Les extrémités du support sont recouvertes de pièces de finition en polymère ABS.  Le support de lavabo convient à tous les types de lavabos avec fixation par boulons. Arrondi et fin, le design facilite le nettoyage.

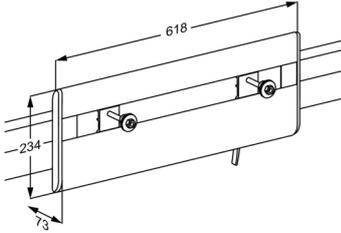

<b>Article</b>	PLUS support de lavabo, manuellement réglable latéralement
<b>Numéro article</b>	R4560
<b>Fonctions</b>	Le support de lavabo est monté directement sur une glissière-support horizontale, et il peut être déplacé le long de la glissière-support horizontale.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>
<b>Déclaration de conformité</b>	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS support de lavabo, manuellement réglable latéralement
<b>Numéro article</b>	R4560

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®