




| | |
|---|--|
| Product Artikelnummer | PLUS wastafel muurframe, handmatig zijwaarts verstelbaar R4560 |
| Kleur | VVS:654001300 NRF:6132444 EAN:5708590309408 HMI: 106242 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Lichtgrijs |
| Beschrijving |  <p>PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS wastafel muurframe. Zijwaarts verstelbaar. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoer systeem R2064/R2065/R2067. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materialen: aluminium en ABS polymeer. Voor montage op horizontale PLUS wandrails (niet inbegrepen).</p> |
| Verstelbaarheid Product capaciteit | Zijwaarts verstelbaar Maximale belasting: 135 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 135 kg, zal elke wandbevestiging met 97 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 135 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 151 kg leunend op de voorzijde van de wastafel. |
| Materialen | Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. |

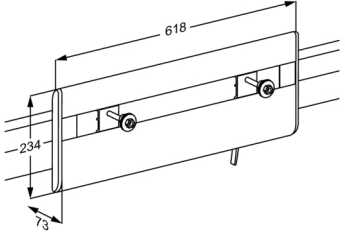

| | |
|---------------------------------|--|
| Product | PLUS wastafel muurframe, handmatig zijwaarts verstelbaar |
| Artikelnummer | R4560 |
| Ergonomy | Het wastafel muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken. |
| Garantie | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum. |
| Reiniging | <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.</p> <p>Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit het oppervlak kan beschadigen beschadigd zijn.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</p> <p>Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.</p> <p>"</p> |
| Conformiteits verklaring | Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. |