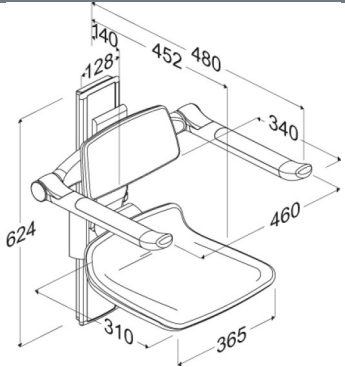




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjddreglerbar R7334035
Färg	NRF:6317091 EAN:5708590359366 HMI: 120479 FDA:INN/D135865 Röd (RAL 3003)
Beskrivning	 PLUS duschstolar erbjuds i flera färger. De finns både som fasta, elektriskt justerbara och manuellt justerbara, och med möjlighet till rygg och armstöd. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS duschsits 310, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjddreglerbart 250 mm, utan användning av verktyg. Uppfällbara armstöd kan höjddregleras oberoende av sits och ryggstöd. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 250 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 23 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 310 x 365 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Armstödens ovala form gör dem lätta och bekväma att hålla, och ger bra stöd.



PRESSALIT®

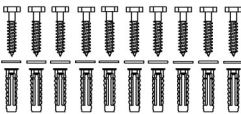
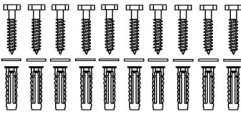
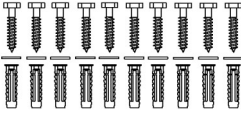
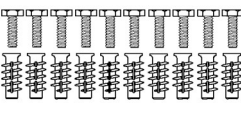
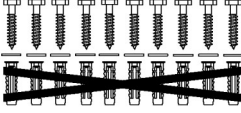
Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjreglerbar R7334035
Funktioner	Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjregleras oberoende av sits och ryggstöd.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

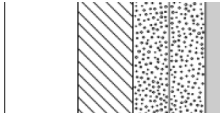
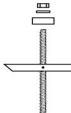
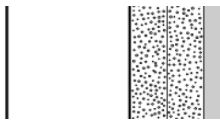
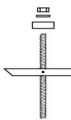
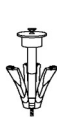
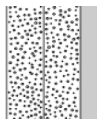
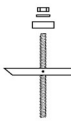
Product	PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar
Varunummer	R7334035

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8662 - Monteringsset, 10 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8612 - Monteringsset, 10 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 310, manuellt höjdglerbar R7334035			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			

pressalit.com

PRESSALIT®