




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement R7114000
Couleur	VVS:777514000 NRF:6317061 EAN:5708590358918 FDA:INN/D135865 Blanc
Description	 PLUS sièges de douche sont disponibles en différentes couleurs. Il y a l'option d'hauteur fixe, réglage électriquement ou réglage manuellement, assise évidée ou pas et avec ou sans dossier et accoudoirs. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-suppots de Pressalit. PLUS siège de douche 450, rabattable. Réglable en hauteur de 240 mm, sans outils. Matériaux : mousse de polyuréthane douce et confortable avec noyau en bois monté sur un profilé aluminium. Pour équipement de PLUS glissière-support verticale (non incluse). <i>Remplace R7400</i>
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur 240 mm Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Lorsque le siège est chargé de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 47 kg. <i>Les PLUS sièges de douche ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
Matériaux Ergonomie Fonctions	L'assise et le dossier sont principalement faits de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et moulée autour d'une armature en contreplaqué de marine et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable. Siège ergonomique – surface d'assise 450 x 437 mm. Rabattable, le siège permet de dégager de l'espace supplémentaire au sol, si nécessaire. Le siège est fabriqué dans un matériau doux et antidérapant qui n'est jamais froid au toucher tout en offrant un bon confort d'assise. Le siège de douche est facile à déplacer si un utilisateur souhaite prendre une douche debout.

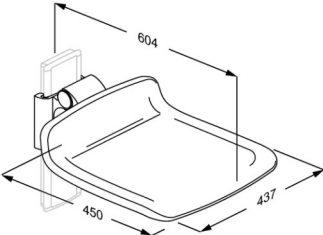

Article Numéro article	PLUS siège de douche 450, réglable en hauteur manuellement R7114000
Garantie Nettoyage	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Terralin protect Dismonzon Plus NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor Petrosol Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.