




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, manuelt højde- og sideværts regulérbart R7364108
Farve	NRF:6317097 EAN:5708590359434 HMI: 124245 FDA:INN/D135865 Mørkeblå (RAL 5011)
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS brusesæde 310, med ryg- og armlæn. Manuelt højdejusterbart 250 mm samt sideværts justerbart, uden brug af værktøj. Armlæn kan højdejusteres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts justerbar 250 mm Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 21 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.

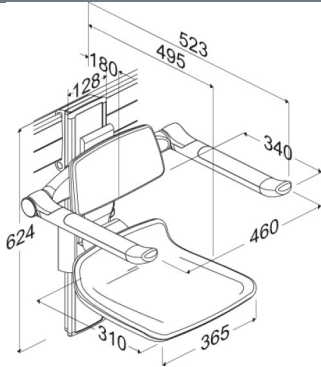

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, manuelt højde- og sideværts regulérbart R7364108
Ergonomi Funktioner	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 310 x 365 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til. Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 310, manuelt højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R7364108
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®