




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7414000
Kleur	VVS: 777515000 NRF: 6317106 EAN: 5708590359526 HMI: 124329 FDA: INN/D135865 Wit
Beschrijving	 Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS douchezitting 450. Handmatig in hoogte 240 mm verstelbaar zonder het gebruik van gereedschap. De zitting is opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. Exclusief bevestigingsset. <i>Vervanger van R7410</i>
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 240 mm Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 47 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd gecoat oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS. Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.

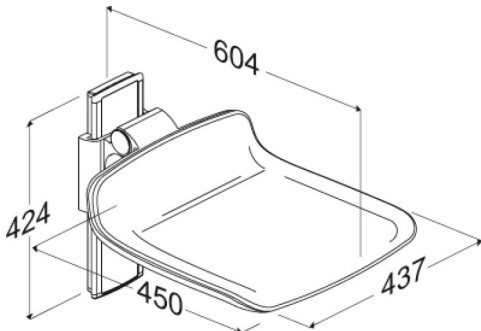

PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7414000
Functie	De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water. "
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®


Product	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R7414000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

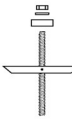Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450, handmatig in hoogte verstelbaar. R7414000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 

pressalit.com