



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7424108
Farbe	NRF:6317116 EAN:5708590359670 HMI: 124341 FDA:INN/D135865 Dunkelblau (RAL 5011)
Produkt- beschreibung	 PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe, elektrisch höhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeöffnung sowie wahlweise mit Rücken- und Armlehnen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen. PLUS Duschsitz 450, mit Rückenlehne. Um 380 mm höhenverstellbar, werkzeuglos einhängbar. Hochklappbare Sitz. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Exkl. Wandbefestigungen. <i>Ersetzt R7420</i>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	380 mm
Produktkapazität	Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 24 kg. <i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rückenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne und Sitzträger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.



PRESSALIT®

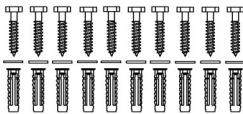
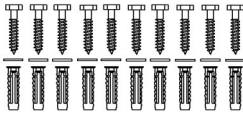
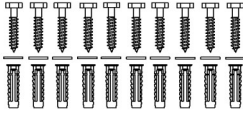
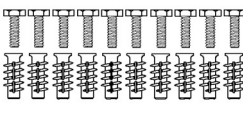
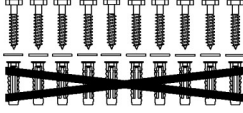
Produkt	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7424108
Ergonomie	Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort.
Funktionen	Der Duschsitz ist hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheres Klicksystems lasse sich Sitzfläche und Rückenlehne gleichzeitig einstellen.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7424108

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8662 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450, manuell höhenverstellbar R7424108
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel.: +45 8788 8788
 Fax: +45 8788 8789
 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®