




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7425112
Farve	VVS: 777515612 NRF: 6317121 EAN: 5708590359748 HMI: 124344 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS brusesæde 450 med hul, med ryglæn. Manuelt højderegulérbart 380 mm, uden brug af værktøj. Sæde er opklappeligt. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Ekskl. monteringsskruer til væg. <i>Erstatter R7421</i>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 380 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 24 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer Ergonomi	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS. Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.

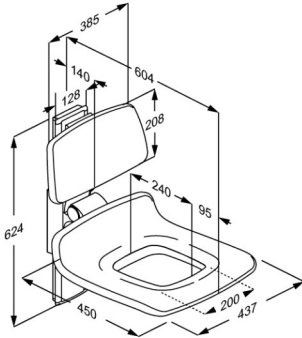

PRESSALIT®






Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7425112
Funktioner	Sædet kan foldes op når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overensstemmelses-erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.








PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7425112

Montering i forskellige vægtyper

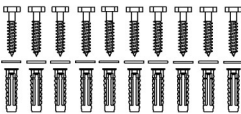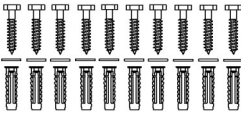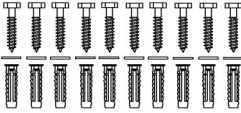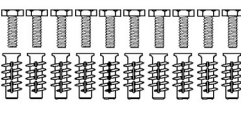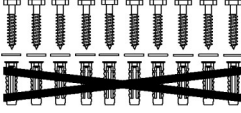	Beton >B25 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

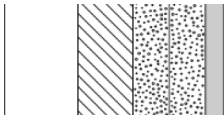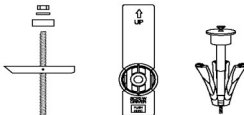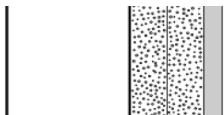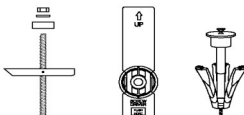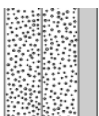

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, manuelt højderegulérbart R7425112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	