




Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450 met opening, handmatig in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar R7465000
Kleur	VVS: 777516800 NRF: 6317143 EAN: 5708590360065 HMI: 124236 FDA: INN/D135865 Wit
Beschrijving	 <p>Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS douchezitting 450 met opening, rug- en armleuningen. Handmatig in hoogte 195 mm verstelbaar en zijwaarts verstelbaar, zonder gereedschap. De armleuningen zijn onafhankelijk in hoogte verstelbaar. De zitting en armleuningen zijn opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. het anti-slip grijp oppervlak van de armleuningen is gemaakt van zachte SEBS. Voor montage op de horizontale PLUS wandrail. (niet inbegrepen).</p>
Verstelbaarheid	In hoogte en zijwaarts verstelbaar
Afstelhoogte	195 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Maximale belasting voor armleuningen is 55 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 23 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>



Product Artikelnummer	PLUS douchezitting 450 met opening, handmatig in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar R7465000
Materialen	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is beschermd met een heldere PU laklaag. De armleuningen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De scharnier arm is ook gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.
Ergonomy	Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De ovale vorm van de armleuningen geeft een comfortabel oppervlakte om op te leunen en tegen aan te duwen.
Functie	De zitting, rugsteun en armleuningen kunnen tegelijkertijd worden afgesteld dankzij een veilig en eenvoudig klik-systeem. De armleuningen kunnen ook afzonderlijk van de zitting en rugsteun worden afgesteld. De zitting en de armleuningen kunnen opgeklapt worden wanneer de zitting niet in gebruik is of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

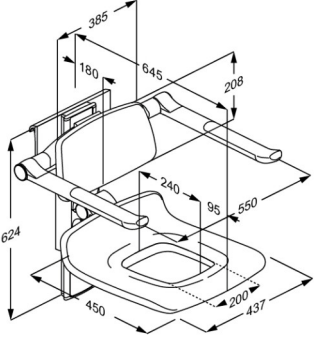

Product	PLUS douchezitting 450 met opening, handmatig in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R7465000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd.</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	PLUS douchezitting 450 met opening, handmatig in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R7465000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®