




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS dossier, pour montage fixe R6304000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777538100 NRF: 6317025 EAN: 5708590365282 HMI: 124221  PLUS dossiers sont disponibles en différentes couleurs et versions ; hauteur fixe ou réglable. Les dossiers peuvent être montés directement sur le mur derrière une toilette sans réservoir ou sur l'ensembles wc de Pressalit. PLUS dossier, 293 x 186 mm, rembourré. Hauteur fixe, montage mural derrière une toilette murale sans réservoir. Matériaux : aluminium et mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Charge maximale admissible : 50 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg. Lorsque le dossier est chargé de 50 kg, chaque vis de montage est chargé de 59 kg. <i>Le dossier doit être en mesure de supporter le poids d'une personne s'appuyant dessus.</i> <i>Le dossier n'est pas conçu pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au dossier reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le dossier chargé à 50% du poids maximal de l'utilisateur.</i> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 50 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 100 kg qui se pencherait sur le dossier.</i>
Matériaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

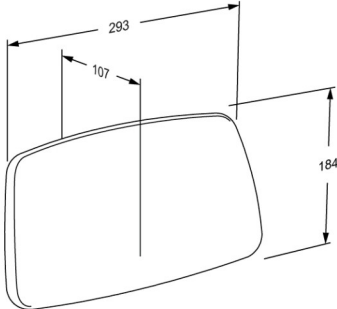

Article	PLUS dossier, pour montage fixe
Numéro article	R6304000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

Article	PLUS dossier, pour montage fixe
Numéro article	R6304000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®