




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS ryglæn, sideværts regulérbart R6414000
Farve	VVS: 777530500 NRF: 6317044 EAN: 5708590365442 HMI: 124208 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere. PLUS ryglæn, 385 x 209 mm, polstret. Sideværts regulérbart, til montering på vandret vægskinne bag et væghængt toilet uden cisterne. Aftageligt uden brug af værktøj og let at sætte på igen, når der er brug for det. Materialer: Aluminium og blødt porskum med trækerne. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Produktkapacitet	Sideværts regulérbar Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 33 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> Ryglæn er ikke personbærende , og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

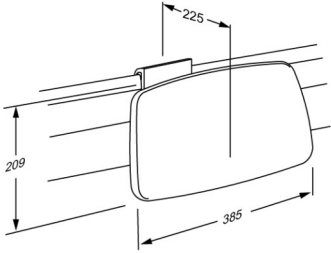

Produkt	PLUS ryglæn, sideværts regulérbart
Varenummer	R6414000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS ryglæn, sideværts regulérbart
Varenummer	R6414000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®