



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm R360070108
Kleur	NRF:6191068 EAN:5708590367880 HMI: 123556 FDA: ILS/D135866 Donkerblauw (RAL 5011)
Beschrijving	 Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. Geschikt voor gebruik met closet welke een diepte vanaf de wand heeft van 540/550 mm. PLUS toiletsteun met veer, 700 mm, ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Voor vaste montage. Opklapbaar. Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel versterkte nylon kern Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 150 kg. Wanneer de toiletsteun belast is met 150 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 161 kg. <i>PLUS toiletsteunen zijn statisch getest met 700 kg (dicht bij de muur), 425 kg (in het midden) en 225 kg (aan het uiteinde).</i>
Materialen	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm R360070108
Ergonomy Funktie	De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen. Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder. De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder. Opklapbaar tegen de muur. De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm
Artikelnummer	R360070108
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

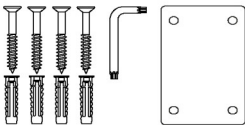
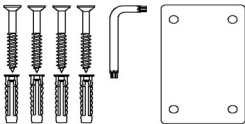
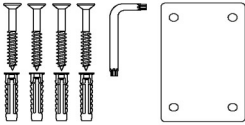
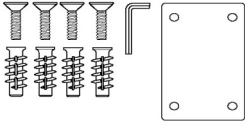
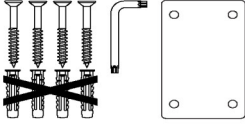
Product	PLUS toiletsteun, 700 mm
Artikelnummer	R360070108
	Beoogd gebruik De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel. Operationele omgeving Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i> Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".



PRESSALIT®

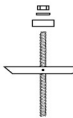
Product	PLUS toiletsteun, 700 mm
Artikelnummer	R360070108

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm R360070108		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com