




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS toiletstøtte, 850 mm, højrehåndsbetjent R381485000
<b>Farve</b>	VVS:615881500 NRF:6191149 RSK:8487450 EAN:5708590368757 HMI: 123635 FDA:ILS/D135866 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Alle PLUS toiletstøtter er med integreret dæmperfunktion, der sikrer at støtten sænkes kontrolleret fra lodret til vandret position. Velegnet til brug sammen med væghængte toiletter, hvor afstand fra væg til front af toilet er 700 mm, samt til gulvstående toiletter. <i>Erstatter udgået model R3285.</i></p> <p>PLUS toiletstøtte. Totallængde 880 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Sideværts regulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på vandret vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Sideværts regulérbar 240 mm Maksimal belastning: 150 kg. Når toiletstøtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue i den vandrette vægskinne med 16 kg. <i>PLUS toiletstøtter er testet statisk med hhv. 700 kg (tæt på væggen), 425 kg (midtpå) og 225 kg (på yderste punkt).</i>
<b>Materialer</b>	Toiletstøtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne er beklædt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter en glasforstærket nylonkerne.

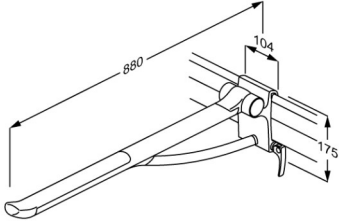

# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 850 mm, højrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R381485000
<b>Ergonomi</b>	<p>Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - både når man står, og når man sætter sig og rejser sig.</p> <p>Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter.</p> <p>Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt.</p>
<b>Funktioner</b>	<p>Undersiden af støtten er udformet til montering af forskelligt tilbehør.</p> <p>Toiletstøtten kan klappes op.</p>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 850 mm, højrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R381485000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.</p> <p><b>Tilsløst brug</b> Toiletstøtten bruges som hjælp til en person, når han eller hun sætter sig på eller rejser sig fra et toilet, eller ved sideværts forflytning fra en kørestol.</p> <p><b>Betjeningsmiljø</b> Til indendørs brug i våde omgivelser, som f.eks. et badeværelse eller vaskerum, i private hjem, på plejehjem og hospitaler. Ved institutionsbrug er den forventede levetid 10 år. <i>Der er foretaget levetidstest iht. ISO 17966:2016.</i></p> <p>For vedligehold, se brugermanual som er vedlagt produktet, og som kan findes på hjemmesiden under "Downloads".</p>



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS toiletstøtte, 850 mm, højrehåndsbetjent
<b>Varenummer</b>	R381485000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®