




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, höger hand manövrerad R381470277
Färg	NRF:6191148 EAN:5708590368740 HMI: 123653 FDA:ILS/D135866 Limegrön
Beskrivning	 Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 540/550 mm. PLUS toalettarmstöd. Total längd: 730 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Sidoreglerbart. Avtagbart och uppfällbart. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Till eftermontering på existerande vågrät PLUS väggskena (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Sidoreglerbar 240 mm Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 16 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>
Material Ergonomi	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål. Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.

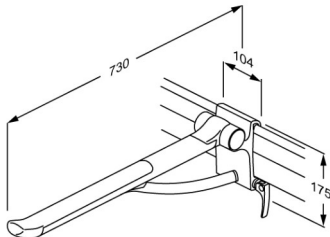

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, höger hand manövrerad R381470277
Funktioner	Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlororine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



Product	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R381470277
	Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol. Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i> För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads". Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4206/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras