




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, met bedieningspaneel, linkshandige bediening R372570112
Kleur	VVS:615878112 NRF:6191139 EAN:5708590368658 HMI: 138184 Antracietgrijs 
Beschrijving	Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. PLUS toiletsteun met bedieningspaneel en veer, 700 mm. In hoogte verstelbaar 150 mm. Opklapbaar. Linkshandige bediening. Alleen voor gebruik met toiletlift TL3/TL4 uitgerust met closet welke een diepte vanaf de wand heeft van 540/550 mm. Ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel versterkte nylon kern. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 150 kg.
Materialen	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.

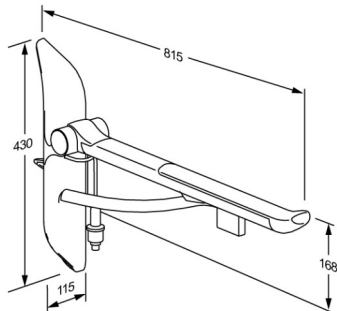

PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, met bedieningspaneel, linkshandige bediening R372570112
Ergonomy	De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen. Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.
Funktie	De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS toiletsteun, 700 mm, met bedieningspaneel, linkshandige bediening
Artikelnummer	R372570112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS toiletsteun, 700 mm, met bedieningspaneel, linkshandige bediening R372570112
	Beoogd gebruik De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel. Operationele omgeving Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i> Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®