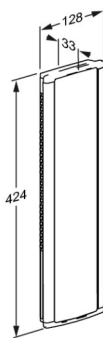




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering R9873112
Farve	VVS:615843134 NRF:7501072 EAN:5708590369280 HMI: 124111 Antracitgrå 
Produktbeskrivelse	Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder. Se Teknisk datablad (Downloads) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering. Til højderegulérbare, venstrehåndsbetjente toiletstøtter. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS.
Ergonomi	Den lodrette skinne gør det muligt at justere produkternes højde. I miljøer med skiftende brugere gør skinnen det let at tilpasse indretningen til den enkelte brugers specifikke behov - uden bygningsmæssige indgreb.
Funktioner	Kombineres den vandrette skinne med den lodrette skinne, kan pladsen i badeværelset udnyttes optimalt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

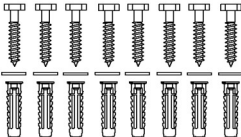
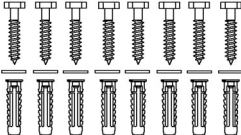
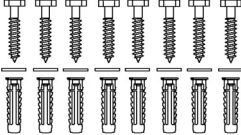
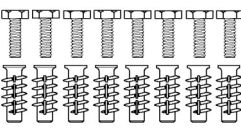
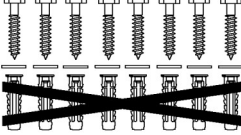
Produkt Varenummer	PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering R9873112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være tilbehør til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.



PRESSALIT®

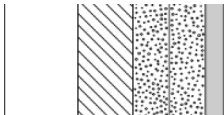
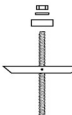
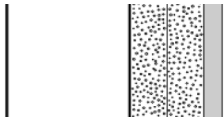
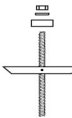
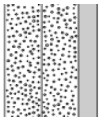
Produkt	PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering
Varenummer	R9873112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8660 - Monteringssæt, 8 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS vægskinne, 400 mm, med hak i venstre side, til lodret montering R9873112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com