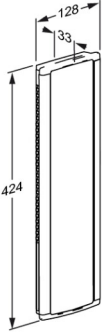




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till vänster, för lodrät montering R9873112
<b>Färg</b>	VVS:615843134 NRF:7501072 EAN:5708590369280 HMI: 124111  Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.</p> <p>PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till vänster, för lodrät montering. Till höjddreglerbara vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringskruvar.</p>
<b>Justerbar</b>	Fast höjd
<b>Material</b>	Aluminium och polystyren plast.
<b>Ergonomi</b>	Den lodräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna på höjden. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.
<b>Funktioner</b>	Om den vågräta skenan och den lodräta skenan kombineras kan utrymmet i badrummet utnyttjas optimalt till fördel för både brukare och vårdgivare.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



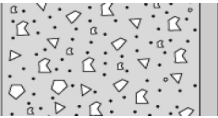
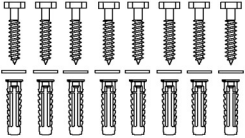

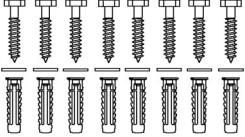
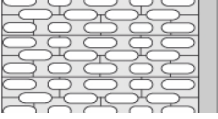
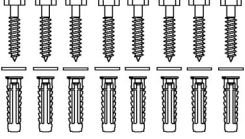
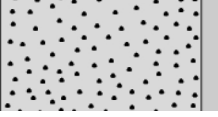
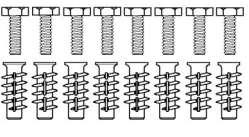
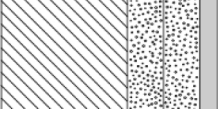
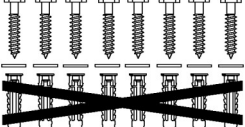
PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till vänster, för lodrät montering R9873112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	<p>Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt är <b>tillbehör</b> till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte är en medicinteknisk produkt, men som är avsedd att användas tillsammans med flera bestämda medicintekniska produkter för att särskilt möjliggöra användningen av de medicintekniska produkterna för deras avsedda ändamål.</p>

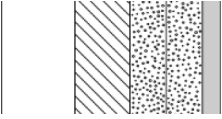
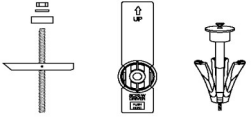
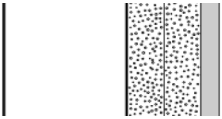
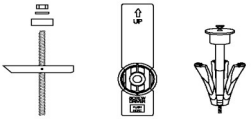
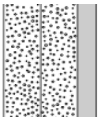



<b>Product</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till vänster, för lodrät montering
<b>Varunummer</b>	R9873112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till vänster, för lodrät montering R9873112
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.