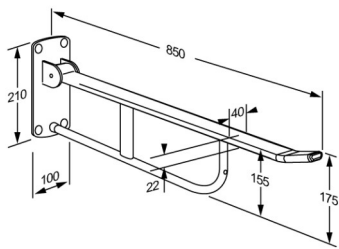




PRESSALIT®

Article	VALUE II barre de relèvement, montage fixe
Numéro article	R1109000
Couleur	VVS:615891100 NRF:6191057 RSK:8487434 EAN:5708590367576 HMI: 123560 Blanc
Description	 VALUE II barre de relèvement, pour montage fixe, rabattables, longueur 850 mm. Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément. VALUE II barre de relèvement, pour montage fixe, rabattables, longueur 850 mm. Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui. Matériaux : acier à revêtement Rilsan, aluminium laqué par poudrage, matière synthétique. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale : 120 kg. Lorsque le barre de relèvement est chargé de 120 kg, chaque vis de montage est chargé de 242 kg.
Matériaux	La matière de base: Acier
Ergonomie	La matière de surface: Rilsan
Fonctions	Pour un appui optimal en position assise ou debout, et lorsqu'on se relève ou s'assied. Large surface pour poser le main et le bras, et forme ergonomique pour une préhension stable et agréable. Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

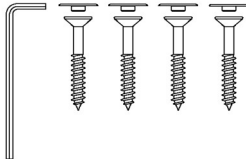
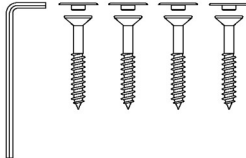
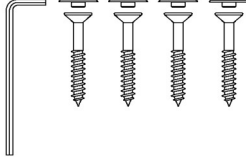
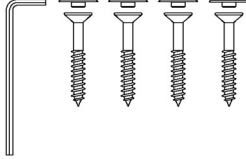
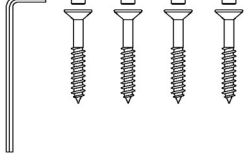
Article	VALUE II barre de relèvement, montage fixe
Numéro article	R1109000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

Article	VALUE II barre de relèvement, montage fixe
Numéro article	R1109000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8593 - 4 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.	



Article Numéro article	VALUE II barre de relèvement, montage fixe R1109000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

Vis de montage pour mur incluses. C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des chevilles appropriées. Veuillez voir le notice de montage.