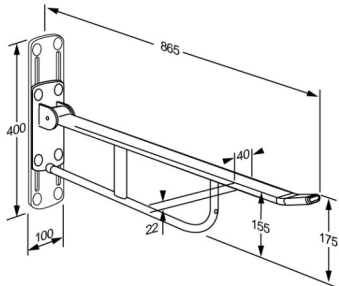




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart R1119000
Färg	VVS:615891200 NRF:6191058 RSK:8487435 EAN:5708590367583 HMI: 123559 Vit
Beskrivning	 VALUE II toalettarmstöd, vägghängd, uppfällbar, 150 mm höjdreglerbara, total längd 865 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat. VALUE II toalettarmstöd, vägghängda, uppfällbara, 150 mm höjdreglerbara, total längd 865 mm. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast. Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 150 mm
Produktkapacitet	Max belastning: 120 kg. När toalettarmstödet belastas med 120 kg, belastas varje fästskruv med 86 kg.
Material Ergonomi Funktioner	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Bred stödyta för hand och arm. En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten. Stöden kan fällas upp när den inte används.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

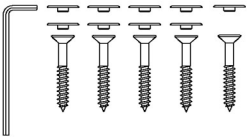
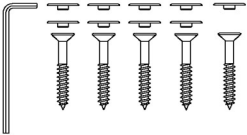
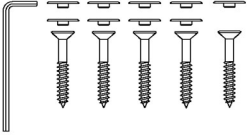
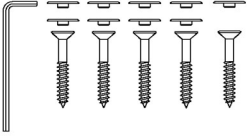
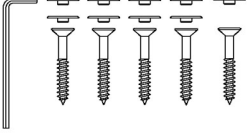
Product	VALUE II toalettarmstöd, höjdglerbart
Varunummer	R1119000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

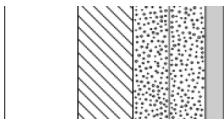
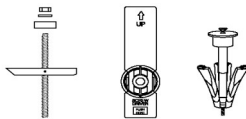
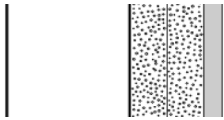
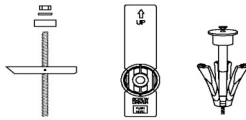
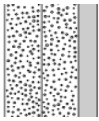
Product	VALUE II toalettarmstöd, höjddreglerbart
Varunummer	R1119000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart R1119000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®