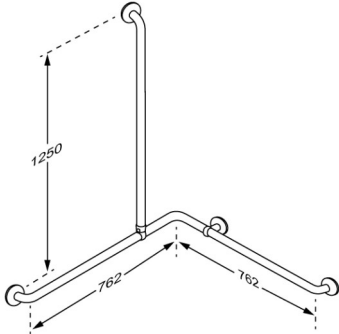




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS håndgrebshjørne med brusestang, højre/venstre vendbart, 762 x 762 x 1250 mm RT156112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	VVS: 777568682 NRF: 6317194 EAN: 5708590371146 HMI: 125873  PLUS håndgreb er produkter af høj kvalitet, der kan kombineres på utallige måder og fuldende indretningen af det funktionelle og fleksible badeværelse. En stabil håndgrebsløsning med et væld af kombinationsmuligheder, som kan lette vejen til øget selvhjulpenhed. PLUS håndgrebskombination, højre/venstre vendbart, diameter 33 mm, A: 762 mm x B: 762 mm x C: 1250 mm, til fastmontering. Afstanden på 50 mm fra væg til greb på et monteret håndgreb, gør det nemt at få fat i grebet. Inkl vægroset, som skjuler monteringskruerne. Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringskruer til væg.
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 235 kg. Når håndgrebet belastes med 235 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 56 kg. <i>Håndgreb er testet med sikkerhedsfaktor 1,5 i henhold til kravene i DS/ISO 17966:2016.</i>
Materialer Ergonomi	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cycloy-plast Strop: Nylon (PA) Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

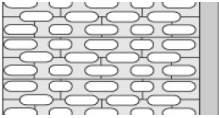
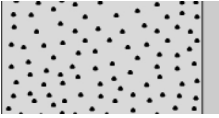
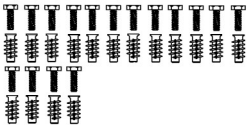
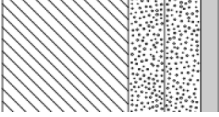
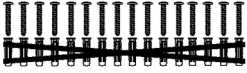
Produkt	PLUS håndgrebshjørne med brusestang, højre/venstre vendbart, 762 x 762 x 1250 mm
Varenummer	RT156112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

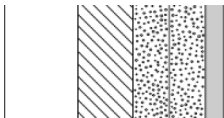
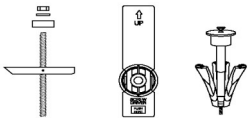
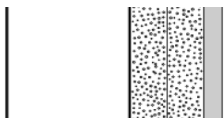
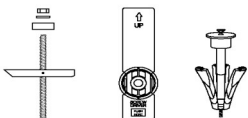
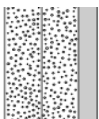
Produkt	PLUS håndgrebshjørne med brusestang, højre/venstre vendbart, 762 x 762 x 1250 mm
Varenummer	RT156112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton > B25 V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8668 - Monteringssæt, 16 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8618 - Monteringssæt, 16 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS håndgrebshjørne med brusestang, højre/venstre vendbart, 762 x 762 x 1250 mm RT156112
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (16 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (16 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed. 

pressalit.com