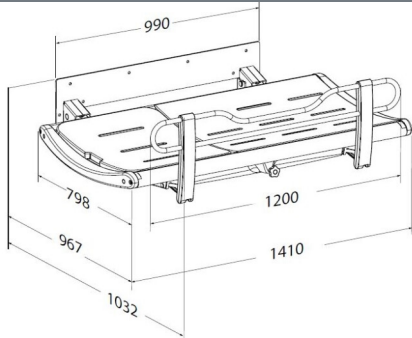




PRESSALIT®

Article Numéro article	SCT 3000 table de douche, montage fixe R8435313299
Couleur	VVS: 777543148 EAN: 5708590374017 HMI: 130168 FDA: INT/D124320 Bleu saphir (RAL 5003)
Description	 Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur. La série SCT 3000 présente un design élégant et primé axé sur le confort et la facilité d'utilisation. SCT 3000 table de douche, montage fixe. Rabattable. Incluant barrière latérale, le flexible (Ø32 mm) et bac collecteur d'eau avec sortie intégrée. Surface de couchage 1300 mm, cotes extérieures 1032 mm x 1410 mm, Matériaux : Acier laqué par poudrage, aluminium, mousse expansée douce et polystyrène. Livré sans vis de montage.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 210 kg. Lorsque la table de douche est chargée de 200 kg, chaque vis de montage est chargé de 60 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 315 kg, car la norme ISO 17966 exige des tests avec un facteur de sécurité de 1,5.</i>
Matériaux	Aluminium, mousse expansée douce, plastique, acier laqué.



Article	SCT 3000 table de douche, montage fixe
Numéro article	R8435313299
Ergonomie	• Le barrière de sécurité de conception ergonomique a une section centrale inférieure pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant lors du transfert, du changement et de l'habillage de l'utilisateur. • Les poignées découpées dans les barrières de sécurité permettent à l'utilisateur de participer quand il doit être retourné, cela motive également l'entraînement physique.
Fonctions	• Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries. • Le bac collecteur d'eau muni d'une sortie d'eau intégrée protège le personnel soignant et le sol des éclaboussures. Le flexible (Ø32 mm) sera conduit vers la sortie d'eau, au sol ou au mur. • La forme légèrement incurvée de la table garantit un confort d'utilisation ainsi qu'une sécurité optimale. • Appui-tête inclinable peut être placé aux deux extrémités de la table. • Grâce au système de compensation à gaz intégré, la table de soins peut être repliée contre le mur après usage pour réduire au minimum l'encombrement.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.



PRESSALIT®

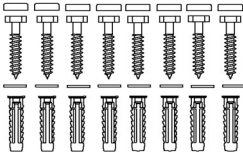
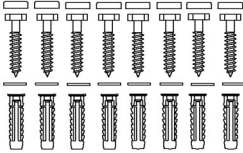
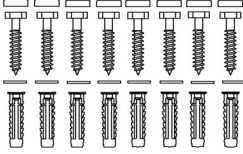
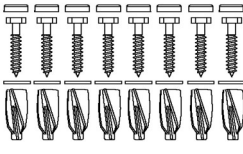
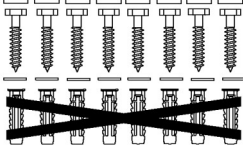
Article	SCT 3000 table de douche, montage fixe
Numéro article	R8435313299
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
Déclaration de conformité	



PRESSALIT®

Article	SCT 3000 table de douche, montage fixe
Numéro article	R8435313299

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8613 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8613 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8613 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8663 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8613 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	SCT 3000 table de douche, montage fixe R8435313299		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (10 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.