




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MCT 2 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar R9432717000
Farbe	VVS: 777542210 EAN: 5708590373201 HMI: 128429 Weiß
Produkt- beschreibung	 Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. MCT 2 mobile Ankleideliege, 820 x 1790 mm, zwei umklappbare Seiten. Elektrisch höhenverstellbar (akkubetrieben) mit Kabelfernbedienung. 400 mm Hubbereich von 550 bis 950 mm. Ausgestattet mit Zentralverriegelungssystem, Drahtkorb zur Aufbewahrung, Stoßstangen an allen vier Ecken sowie Batterie und Ladegerät. Hebesäulen und Kabelfernbedienung IPX6, Akku und Ladegerät IPX5. Matratze muss separat bestellt werden.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	400 mm
Produktkapazität	Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 250 kg (Anwender + Wasser + Zubehör). <i>Die Pflegeliege ist mit 625 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>

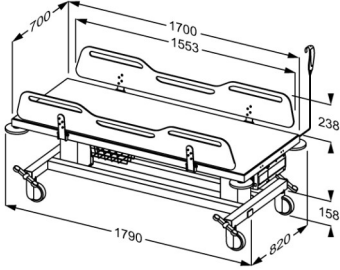

Produkt	MCT 2 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9432717000
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 19 mm/s
Materialien Ergonomie	Materialien: Aluminium, Kunststoff, Kompaktlaminat und lackierter Edelstahl. • Die ergonomisch geformten Seitengitter der mobilen Ankleideliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. • Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens. • Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen. • Die unter dem Duschwagen angebrachten Drahtkörbe bieten Ablagemöglichkeiten für Accessoires und für weitere Produkte, die für die Pflege in der Dusche benötigt werden. Die Drahtkörbe sind leicht zugänglich und bieten viel Ablagefläche. • Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.



Produkt	MCT 2 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9432717000
Funktionen	• Der Ankleideliege kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden. Zwei Hebesäulen sorgen für eine ästhetisch ansprechende, hygienisch optimierte, physikalisch und optisch stabile Konstruktion. • Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit. • Das zentralisierte Bremssystem ermöglicht es dem Betreuer, alle vier Räder gleichzeitig zu blockieren, indem er auf einen einzelnen Bremshebel tritt, um eine bessere Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in jeder Position zu gewährleisten. • Alle Verriegelungs- und Bremssysteme werden aktiviert, indem von oben auf einen der vier Bremshebel getreten wird. Die einfüßige Bedienung ist leicht und schnell auszuführen und verhindert mögliche Verletzungen an den Füßen. Die rutschfeste Oberflächenstruktur aller Bremsen ermöglicht eine sichere Bedienung auch bei Nässe. • Ein drehbarer Stoßfänger an jeder Ecke des Wagens schützt die umgebenden Wände und das Produkt selbst bei Kontakt sowie beim Transport von Raum zu Raum. • Die Höhenverstellung erfolgt über ein Akku inklusive Ladegerät. Das Wandladegerät für den Akku kann in jedem Raum montiert werden. Wenn der Akku fast leer ist und die Kabelfernbedienung betätigt wird, ertönt ein Piepton. • Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3-4 Stunden. • Drehdurchmesser: 1935 mm.
Stromanschluss (V)	230
Motor	BL1 (Linak) IPX6
Steuerkasten	COBO / CU20 (Linak) IPX6
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak) IPX6
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 100 W



Produkt	MCT 2 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9432717000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft platziert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 2 mobile Ankleideliege, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R9432717000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®