




PRESSALIT®

Product Varunummer	MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdreglerbar R9432721000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777542220 EAN: 5708590373218 HMI: 128432  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. MCT 2 mobilt vårdbrits, 820 x 2190 mm, två nedfällbara sidor. Elektrisk höjdjusterbar (batteridrivnen) med manöverdosa. 400 mm höjdjustering från 550 till 950 mm. Utrustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra hörnen, batteri och laddare. Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX5. Madrass måste beställas separat.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	400 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 250 kg (brukarvikt + vatten + tillbehör). <i>Britsen har testats statiskt med 625 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarderna som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 19 mm/s

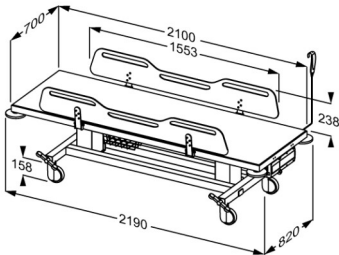

Product	MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdregerbar
Varunummer	R9432721000
Material	Aluminium, plastmaterial, kompakt laminat och lackerat rostfritt stål.
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning. • En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa. • Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och enkel användning i valfri position. • Alla lås- och frigöringsaktuatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta förhållanden. • Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något under transporten. • Elektrisk höjjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras. • Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar. • Vändradie: 2310 mm.



PRESSALIT®

Product Varunummer	MCT 2 mobil vårdbräda, elektriskt höjreglerbar R9432721000
Anslutnings ström (V)	230
Motor	BL1 (Linak) IPX6
Kontrollbox	COBO / CU20 (Linak) IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak) IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 100 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada ytan. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (hushållningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	MCT 2 mobil vårdbräda, elektriskt höj- och sänkbart
Varunummer	R9432721000
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt er tilvirket i overensstemmelse med: - Forordning (EU) 2017/745 om medicintekniske produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®