




PRESSALIT®

Article	MSCT 1 chariot de douche et de change, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9434717000
Couleur	Blanc
Description	VVS: 777542410 EAN: 5708590373225 HMI: 128425  Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur. MSCT 1 chariot de douche et de change, 820 x 1790 mm, quatre côtés rabattables. Réglable en hauteur électriquement (avec batterie) par télécommande filaire. Réglable 400 mm de 550 à 950 mm. Inclinaison de 3 degrés (pour un meilleur drainage de l'eau). Système de freinage central, panier de rangement, 4 palets pare-chocs, batterie avec chargeur. Les colonnes d'élévation sont IPX6, la batterie et le chargeur sont IPX5. Matelas de douche et appui-tête à commander séparément.
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	400 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 200 kg. Charge maximale (SWL) : 250 kg (poids d'utilisateur + de l'eau + accessoires). <i>La table a été testée statiquement avec 625 kg, car la norme IEC 60601-1 exige des tests avec un facteur de sécurité de 2,5.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 19 mm/s Vitesse en descendant: 19 mm/s

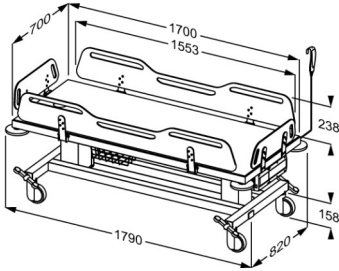

Article	MSCT 1 chariot de douche et de change, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9434717000
Matériaux	Aluminium, plastique, stratifié compact et acier inoxydable laqué.
Ergonomie	• La barrière de sécurité ergonomique a une partie centrale rabaisée très pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant, pendant les transferts, la douche, le séchage, le change ou l'habillage de l'utilisateur. • Les barrières de sécurité manipulables d'une seule main permettent au soignant de maintenir un contact visuel et physique avec l'utilisateur pendant tout le processus des soins. Les rails de sécurité rabattables permettent également un accès facile des quatre côtés de la table. • Les poignées découpées dans les barrières de sécurité permettent à l'utilisateur de participer quand il doit être retourné, cela motive également l'entraînement physique. • Un tiroir de rangement permet au soignant de ranger les fournitures et d'avoir immédiatement à portée de main ce qui est nécessaire pour la douche. • Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries.



Article	MSCT 1 chariot de douche et de change, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9434717000
Fonctions	• Le chariot peut être déplacé d'une pièce à l'autre pour faciliter le transport et pour plusieurs utilisateurs. Deux colonnes de levage sont utilisées pour créer un matériel esthétique, solide et stable, optimisé aussi du point de vue hygiénique. • Barrières rabattables et relevables intuitivement d'une seule main. • Le système de freinage centralisé permet au soignant de verrouiller simultanément les quatre roues en appuyant sur n'importe quelle pédale, assurant une meilleure sécurité et une facilité d'utilisation dans n'importe quelle position. • Toutes les pédales de verrouillage et de déverrouillage sont activées en appuyant dessus pour les abaisser et assurer une interaction ergonomique qui évite les blessures aux pieds et aux orteils. Le motif de la surface antidérapante de toutes les pédales de frein empêche de glisser même dans des conditions humides. • Un pare-chocs rotatif à chaque coin du chariot protège les murs environnants et le produit lui-même lors des déplacements. • Réglage électrique de la hauteur avec batterie et chargeur. Le chargeur mural pour la batterie peut être monté dans n'importe quelle pièce, incluant l'extérieur de la salle de bain si vous le souhaitez. Lorsque la batterie est faible, un bip retentit chaque fois que la télécommande filaire est activée. • Temps de charge de la batterie : 3 à 4 heures. • Le MSCT 1 a également une zone de drainage abaissée, qui réduit la quantité d'eau qui pourrait rester dans les angles et assure un drainage et un séchage faciles. • Une évacuation et un 1,6 m tuyau élargis assurent un drainage efficace qui permet même aux déchets humains de passer à travers. Une inclinaison de 3 degrés pour faciliter l'évacuation de l'eau.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	BL1 (Linak) IPX6
Boîte de contrôle	COBO / CU20 (Linak) IPX6
Télécommande filaire	HB30 (Linak) IPX6
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 100 W



PRESSALIT®

Article	MSCT 1 chariot de douche et de change, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9434717000
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation. REMARQUE Si le produit est placé dans un environnement chargé en sel ou en chlorure, la garantie sera réduite de 3 ans à 1 an. Le sel et le chlorure ont un effet corrosif sur les composants du produit et diminuent la durée de vie du produit.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - la directive 2011/65/UE sur RoHS.



PRESSALIT®

Article	MSCT 1 chariot de douche et de change, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R9434717000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®