




Produkt Produktnummer	VALUE II Stützklappgriff, 850 mm, inkl. Bedienpanel für TL3/TL4 WC-Lifter R1183000
Farbe	Weiß 
Produktbeschreibung	<p>VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit ALBA-Flügel Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL3 und TL4 WC-Liftern entwickelt. Die elektrische Höhenverstellung des WC-Liftern ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich.</p> <p>VALUE II Stützklappgriff, inkl. Bedienpanel für TL3/TL4, 850 mm, hochklappbar, höhenverstellbar 150 mm ohne Werkzeug (linksbedient). Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl und Aluminiumdruckguss. Für die Nachmontage auf TL3/TL4 elektrischem WC-Lifter, ALBA-Flügel Montageprofil mitgeliefert. Rechts vom Benutzer montiert.</p>
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 150 mm
Produktkapazität	Maximale belastbarkeit: 120 kg
Materialien	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan© (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Das Befestigungsprofil ALBA-Flügel besteht einem Aluminiumdruckguss.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.

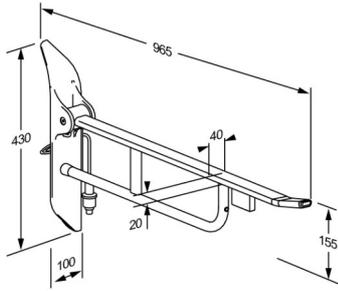

Produkt	VALUE II Stützklappgriff, 850 mm, inkl. Bedienpanel für TL3/TL4 WC-Lifter
Produktnummer	R1183000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Diese Produkt ist produziert worden gemäß:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.