




PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Brusemadras R844717304
<b>Farve</b>	VVS: 777542811 EAN: 5708590373911 HMI: 128437  Perlegrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 1660 mm. Inkl. 1,6 m slange. Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 1660 mm. Inkl. 1,6 m slange.
<b>Materialer</b>	Madrassens betræk er (svejset) polyester med PVC-belægning. Det er UV-resistent og 100% vandtæt. Det indeholder hverken CFC eller latex. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som er godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
<b>Garanti</b>  <b>Rengøring</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.  Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.  Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.  DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Tvættsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes  Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

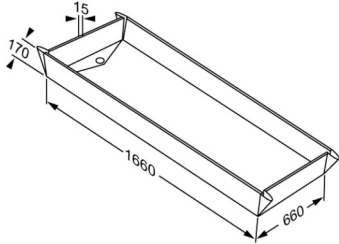

PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Brusemadras
<b>Varenummer</b>	R844717304
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være <b>tilbehør</b> til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®