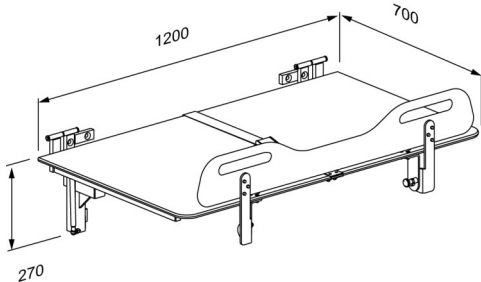




PRESSALIT®

Article Numéro article	CT 5000 table de change, hauteur fixe R8455512000
Couleur	VVS: 777540820 EAN: 5708590376585 HMI: 138135 FDA: INT/D124320 Blanc
Description	 Pressalit propose plusieurs tables de douche et de change haut de gamme, mobiles, à hauteur variable ou fixe. Elles sont conçues pour apporter une surface stable pour doucher et changer les personnes à mobilité réduite, enfants et adultes. Ces tables peuvent être utilisées dans les écoles, les établissements de santé, les hôpitaux mais aussi au domicile privé. Elles sont toutes conçues pour être résistantes, confortables et faciles à nettoyer. Leur design et la flexibilité assurent des conditions de travail optimales pour l'aidant ainsi qu'un haut niveau de confort et de sécurité pour l'utilisateur. CT 5000 table de change, surface de couchage en stratifié compact, 700 x 1200 mm, blanc. Avec barrière latérale et ceinture de corps, rabattable, hauteur fixe, montage mural.
Réglage Hauteur de réglage Capacité du produit	Montage fixe 0 mm Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 150 kg. Charge maximale (SWL) : 150 kg. Lorsque la table de douche est chargée de 150 kg, chaque vis de montage est chargé de 52 kg. <i>La table a été testée statiquement avec 225 kg car la norme ISO 17966 exige des tests avec un facteur de sécurité de 1,5.</i>
Matériaux	Acier laqué par poudrage, surface de couchage en stratifié compact.



PRESSALIT®

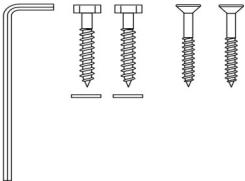
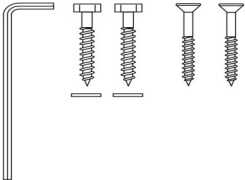
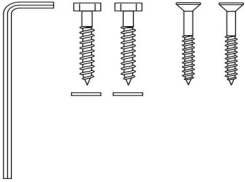
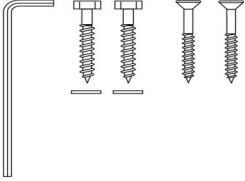
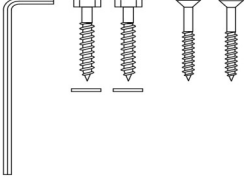
Article	CT 5000 table de change, hauteur fixe
Numéro article	R8455512000
Ergonomie	Le barrière de sécurité de conception ergonomique a une section centrale inférieure pratique, qui offre un meilleur accès et un meilleur environnement de travail pour le soignant lors du transfert, du changement et de l'habillage de l'utilisateur. Les surfaces de contacts sont lisses et faciles à nettoyer car elles n'accumulent ni la saleté ni les bactéries.
Fonctions	La table de change peut être rabattue à la verticale pour occuper le moins de place possible quand elle n'est pas utilisée.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



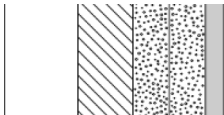
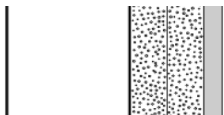
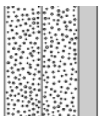
PRESSALIT®

Article	CT 5000 table de change, hauteur fixe
Numéro article	R8455512000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 Kit vis det montage, 2 vis cervicales Ø10 x 70 et 2 vis fraisées Ø10 x 80	
	Brique pleine >= Mz12 Kit vis det montage, 2 vis cervicales Ø10 x 70 et 2 vis fraisées Ø10 x 80	
	Parpaing plein >= Hlz12 Kit vis det montage, 2 vis cervicales Ø10 x 70 et 2 vis fraisées Ø10 x 80	
	Béton cellulaire P4 Kit vis det montage, 2 vis cervicales Ø10 x 70 et 2 vis fraisées Ø10 x 80	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois Kit vis det montage, 2 vis cervicales Ø10 x 70 et 2 vis fraisées Ø10 x 80	



Article Numéro article	CT 5000 table de change, hauteur fixe R8455512000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

Vis de montage pour mur incluses. C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des chevilles appropriées. Veuillez voir le notice de montage.